

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**МАСАЖЕР З ІНФРАЧЕРВОНИМ
ВИПРОМІНЮВАННЯМ
Модель: OR-MS23**

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці! Велике спасибі Вам за купівлю продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.

<http://www.orion.ua>

Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій, і збережіть її на майбутнє.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Перед використанням приладу перевірте, щоб напруга розетки електромережі співпадала з напругою, зазначеною на приладі.
2. Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Не дозволено використання приладу людьми з кардіостимулятором.
4. Не користуйтеся приладом після вживання безпечних, седативних препаратів або алкоголю, так як ваша чутливість до тепла може бути знижена.
5. Прилад призначений для тимчасового зняття незначних болів і м'язової напруги. Прилад не може бути використаний для лікування і замість медичних препаратів. Якщо ви перебуваєте під медичним наглядом, обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем перед використанням приладу.
6. Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
7. Якщо прилад упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтеся до води.
8. Не залишайте прилад без нагляду під час роботи і коли він підключений до мережі.
9. Не користуйтеся приладом, якщо виявлено пошкодження шнура, виделки чи інших частин.
10. Заборонено самостійно ремонтувати прилад. Віднесіть прилад до сервісного центру.
11. Тримайте прилад і відключайте його від мережі тільки сухими руками.
12. Відключаючи прилад від мережі, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
13. Перед тим, як помістити прилад назад в упаковку, дайте йому охолонути.
14. Слід бути вкрай уважним, коли прилад використовується біля дітей.
15. Використовуйте прилад тільки в цілях, описаних в даній Інструкції з експлуатації.
16. Прилад призначений тільки для домашнього використання.
17. Використовуйте тільки ті насадки, які входять у комплект.
18. Не користуйтеся та не зберігайте прилад поблизу гарячих поверхонь/предметів.
19. Не намотуйте шнур навколо приладу.
20. Обережно робіть масаж дітям та іншим особам, чутливим до тепла.
21. Завжди відключайте прилад від мережі після використання, перед чищенням.
22. Не закривайте вентиляційні отвори, це може стати причиною перегріву приладу.
23. Не допускайте попадання будь-яких предметів у вентиляційні отвори приладу.
24. Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
25. Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.
26. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

УВАГА!

1. Не користуйтеся приладом більше 20 хвилин поспіль. Кожні 20 хвилин вимикайте прилад на 30 хвилин, щоб дати йому охолонути. Уникайте безперервного масажу однієї і тієї ж області протягом тривалого часу.
2. Не користуйтеся приладом, якщо у вас підвищена температура, надчутливим шкіра, порушений кровообіг, присутні набряки, запалення і виразки на шкірі.
3. Не користуйтеся приладом після серйозних ушкоджень м'язів. Проконсультуйтеся спочатку з лікарем.
4. Припиніть використання масажера, якщо після його застосування виникає біль або припухлість шкірних покривів.
5. Не користуйтеся приладом, якщо у вас є захворювання вен (флебіт, тромбоз, варикозне розширення), пошкоджені або запалені шкірні покриви (свіжі, відкриті рани), забиті місця.
6. Якщо у вас діабет, порушений кровообіг або проблеми з серцем, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед використанням приладу. Не масажуйте живіт під час вітності.

ДЕТАЛІ



Для підвищення ефективності масажу рекомендуємо встановлювати спеціальні насадки. Чотири змінні насадки забезпечують масаж всього тіла: спини, плечей, рук, ніг, стегон, шиї.

Ви можете масажувати тіло через одяг, але найкращий ефект досягається при масажі оголеного тіла.

Знімати/одягати насадки необхідно, коли прилад вимкнений.

Для масажу чутливих ділянок тіла, а також при застосуванні інфрачервоного прогрівання рекомендуємо використовувати прилад без насадок.

Насадки:

1. Роликова масажна насадка;
2. Масажна насадка для тіла;
3. Масажна насадка для суглобів;
4. Конусна масажна насадка.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Даний масажер призначений для:

- розслаблення й зняття напруги в м'язах,
- зняття почуття загальної втоми,
- стимуляції кровообігу,
- усунення болю при ревматизмі,
- підвищення тону організму,
- усунення болю в хребцях,
- зняття стресу і втоми.


Масаж з інфрачервоним випромінюванням

Масажер дозволяє виконувати масаж разом з інфрачервоним випромінюванням. Інфрачервоне випромінювання сприятливо впливає на людський організм, забезпечує глибоку стимуляцію шкіри, кровоносних судин, стимулює оновлення клітин, покращує кровообіг. Тепловий вплив інфрачервоних променів та масаж зменшує м'язову напругу і підвищує опір організму при легких формах застуди, запаленнях і незначних травмах.

Застосування:

Тримайте прилад за ручку і встановіть бажану функцію роботи відповідно до позначок на приладі. Направляйте масажер у напрямках, зазначених на малюнку справа.

Примітка: зазначені напрями для масажу є рекомендованими, а не обов'язковими.

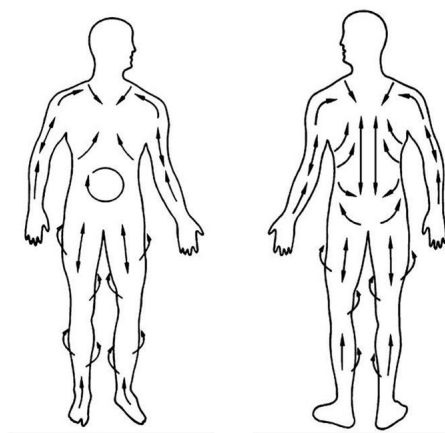

OFF (0)	Прилад вимкнений.
Масаж (М)	Функція тільки масажу (без інфрачервоного випромінювання). Встановіть потрібну насадку для оптимального масажу.
МН	Масаж з інфрачервоним випромінюванням. Найкращий результат досягається без використання насадок.

Примітка!

- Для більш ефективної дії масажера необхідно переміщувати його повільно і рівномірно, плавними круговими рухами або рухами вперед і назад, не прикладаючи надмірного тиску.
- Перед використанням масажера з функцією інфрачервоного випромінювання перевірте температуру інфрачервоної пластини. Ви можете самостійно регулювати температуру нагріву. Для зменшення температури періодично вимикайте перемикач для інфрачервоного режиму на кілька секунд, а потім знову увімкніть його.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад з електромережі і дайте йому повністю охолонути. Протріть корпус масажера спочатку злегка вологою, а потім сухою м'якою тканиною.
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, розчинники і агресивні рідини.

- Насадки можна мити водою з м'якими миючими засобами. Перед використанням насадки повинні бути сухими.
- Не опускайте прилад у воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Джерело живлення: 230В
- Потужність: 12Вт
- Номінальний струм: 0,05А
- Ступінь захисту від вологи: IPX0
- Вага нетто/брутто: 690г/1050г
- Габаритні розміри виробу: 420Х105Х95мм
- Габаритні розміри коробки: 480Х105Х115мм
- Колір: білий/зелений

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Масажер з інфрачервоним випромінюванням OR-MS23 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрседро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-MS23

Основне призначення: Масажер з інфрачервоним випромінюванням

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: 2011 рік

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE

Вага нетто: 690г

Вага брутто: 1050г

Колір: білий/зелений